



OGAWA

奥佳华



天橙棒
Magic Swan
手持按摩器

OG-2620

使用手册
User Manual



奥佳华中国官网：www.ogawaworld.net.cn

OG-2620 Magic Swan 天鹅棒 手持按摩器

感谢您购买奥佳华天鹅棒手持按摩器，使用前请仔细阅读操作手册，并特别注意安全事项，以便正确操作和使用本产品。

本手册提供使用者安全及有效的操作方式，请在阅毕后妥为收藏，以便日后参考查询。

目录 CONTENTS

安全指引	2
保修权限	6
产品零件及配件	7
产品特性及使用示意	8
操作方式及功能说明	9
产品规格	9
故障排除	10
产品保养	11

安全指引

a) 重要安全事项说明

- 为确保安全及正确使用产品，使用前请务必详细参阅操作手册。
- 请务必依照本操作手册内的产品用途使用本产品。
- 使用完毕后或清洁产品前，请将电源插头从插座中拔除。
- 为避免因过热而导致走火、触电或造成伤害，请勿将产品置于枕头或毯子等不易散热的环境下操作。
- 请勿覆盖使用，以免造成马达温度过高而导致故障或损坏。
- 请勿让儿童自行操作本产品。
- 身心功能障碍与伤残者请谨慎使用，如需使用务必有旁人的指导且能负责其安全。
- 如在按摩进行中感到不适，请立即停止按摩。
- 下列状况发生时，切勿使用本产品：电源线或电源插头损坏；操作不正常；曾掉落地面或者损伤；曾浸入水或者其它液体中。请联系维修服务中心进行检查和维修。
- 请勿使用非制造商所推荐的零配件。
- 请勿将物品插入或者掉落产品的任何开口中。
- 切断电源前，请先将所有的操作控制关闭，然后将电源插头由插座中拔除。

b) 使用环境

- 请勿在潮湿或过多灰尘的环境下使用产品，以免产品发生故障。
- 请勿在室温高于 40°C 的环境下使用本产品。
- 请勿将产品放置户外。
- 请勿将产品置放于电热器旁、炉具附近或者阳光直射处。

c) 不适宜使用本产品的人士

如果您有以下任何情形之一，使用前请先咨询医生。

- 正在接受医生治疗者或身体感觉不适者
- 高血压、心脏病、脑动脉硬化、脑血栓患者
- 患有恶性肿瘤者
- 孕妇及月经期妇女
- 患有骨骼疏松症
- 正在使用心脏起搏器或者植入医疗器械者
- 患有急性疾病者
- 未成年人

d) 开关注意事项

- 请勿用湿手操作控制开关。
- 请勿让控制开关接触水等液体。

e) 使用电源插头及电源线须知

- 请勿用潮湿的双手安插或者拔除电源插头，以免触电或者导致机件故障。
- 拔出电源插头时，请握住插头本身，切勿拉扯电线。
- 为保证安全，每次使用产品完毕，请务必将主电源切断
- 电源线務必和加热表面保持安全距离。
- 请勿将电源线置于产品或任何重物之下。
- 请勿将电源线缠绕于产品上，以免电源线受损而导致触电或者电线走火。
- 当电源线或者电源插头损坏时，切勿继续使用产品。
- 电源插座有松动的状况时，请勿使用产品。
- 请勿用电源线移动产品或将电源线当握把使用。
- 当电源线损坏时，必须由服务中心或经授权的技术人员进行检查及维修。



注意

- 请勿在产品操作时入睡。
- 请勿在酒醉或身体不适时使用本产品。
- 连续使用本产品时间请勿超过三十分钟。
- 请勿在进食前后一小时使用，以免造成反效果。
- 在偏低室温中使用产品时，切勿骤然使用温热功能，建议将室内温度逐渐调至正常范围后再使用。
- 若是将产品由低温储存处移至温暖环境使用时，可能会因为机件内水汽聚集而影响产品正常运作，甚至造成机件故障。建议移动后，先将产品在正常室温放置 1 小时后再开始使用。
- 使用中查觉任何机件故障或不正常状况，请立即停止使用。
- 若在使用中发生电流中断的状况，应注意避免因电力突然恢复而造成使用者受伤。
- 雷电情形发生时，不宜使用本产品。

保修权限

1. 本保修权限不可转让。
2. 本产品有效保修期为一年。
3. 自用户购机之日起在保修期内可享受全免保修（外观不在保修范围内）。
4. 当要求保修服务时，请出示原始购买凭据及保修卡。
5. 购买时间以专柜开出的有效单据为准。
6. 此保修范围不适用于租赁、交易、商业、机构及其他居民使用者。
7. 以下情形不属于保修范围，只提供有偿维修服务（收取人工费和材料费）
 - (a) 一切人为因素损坏，包括非正常工作环境下使用、不按说明书使用和保管、使用不当引起的损坏等；
 - (b) 用户私自拆机、自行维修、改装或未经本公司授权的第三方拆动、改装、维修；
 - (c) 购买后因自行不良运输造成的损坏；
 - (d) 因其他不可抗力因素（如水灾、火灾、雷击和地震等）造成的损坏。

产品零件及配件

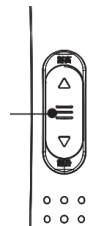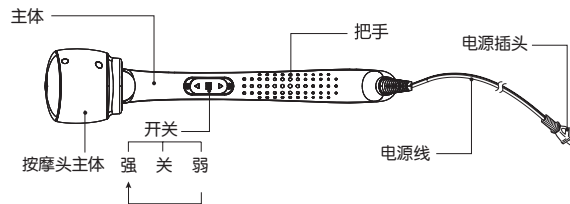

控制面板


开关键：

1. 将开关键拨向中间，即为关机，所有功能关闭。
2. 将开关键往上方拨，按摩力道为强。
3. 将开关键往下方拨，按摩力道为弱。

产品特性

- 1、巴掌般大小捶打按摩头，强劲有力的捶打按摩，深入肌肉层，快速有效地舒缓肌肉酸痛和紧绷感。
- 2、两种捶打按摩速度，配合不同的按摩需求。高速捶打按摩能在短时间内有效地舒缓肌肉酸痛感。低速捶打则提供您柔和舒适的按摩体验。
- 3、按摩棒以天鹅垂颈的形态展示其美妙的造型，完美贴合按摩部位，带来丰富的按摩体验。精巧设计，精致享受。


使用示意

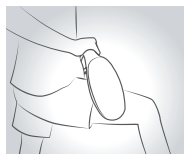

大腿



小腿

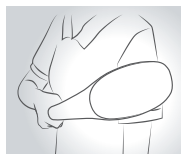

手臂



腰部



肩部



腹部

操作方式及功能说明

a) 使用前准备

- 检查产品有无破损。
- 将产品放置于想要按摩的身体部位。

b) 使用方法

- 将产品电源插头插入 220V/50Hz 的电源插座上。
- 操作方法

将开关键拨向中间，即为关机，所有功能关闭。

将开关键往上方拨，按摩力道为强。

将开关键往下方拨，按摩力道为弱。

产品规格

产品名称	Magic Swan 天鹅棒 手持按摩器
产品型号	OG-2620
额定电压	220V~
额定功率	18W
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

故障排除

若在使用此产品时遇到问题，请参考下列几点提示及处理方法。若此产品仍处于故障状态请将产品送至服务中心或经授权的技术人员进行检查及维修。

异常情况	可能原因	处理方法
无法开机	1. 未通电 2. 开关键未开启	1. 接入电源或检查电源是否连接良好 2. 开启电源开 / 关按钮
突然停止操作	1. 断电 2. 连续使用时间过长，产品过热保护	1. 检查电源接口是否接好 2. 重新开启开 / 关按钮 3. 产品冷却后重新开启开 / 关按钮

产品保养

a) 贮藏

- 不使用时，请将产品放入包装盒中，并放置于安全、干燥、通风、阴凉处。
- 切勿扭曲电线。
- 切勿使用电线悬挂产品。
- 避免尖状物刮伤产品表面。
- 请勿将产品放置在阳光直射或高温处。

b) 清洁

- 清洁之前，确认产品开关已关闭，并拔出电源插头。
- 请使用干布清洁产品表面。

* 注意

- 切勿使用具有腐蚀性的清洁剂，如苯或稀释剂来清洁产品。

c) 保养

- 保持产品清洁并远离高湿度的场所。
- 如果长时间不使用本产品，请用防尘罩（需自行购买）罩住产品，防止落入灰尘。

联系我们

厦门蒙发利营销有限公司

地址：厦门市思明区前埔路 168 号

邮编：361008

服务热线：400-885-9880

华东区域

洽谈电话：021-62120981

地址：上海市普陀区曹杨路 505 号 901 室（尚诚国际大厦）

华北区域

洽谈电话：010-58670435

地址：北京市朝阳区东三环南路 58 号富顿中心 A 座 2309-2310 室

洽谈电话：0311-83830323

地址：河北省石家庄市桥西区中山西路 188 号中华商务中心 A 座 501

华中区域

洽谈电话：027-85605586

地址：武汉江汉区北湖西路城市之光 B 栋 2 单元 1101 室

华南区域

洽谈电话：020-81406933

地址：广州市天河区马场路富力公园 28 号之四 2302 室

洽谈电话：0755-83864141

地址：广东省深圳市福田区华强北群星广场 A1008

东北区域

洽谈电话：024-85611694

地址：沈阳市铁西区建设中路第一商城 B 栋 11 楼 02 室

西北区域

洽谈电话：029-89284711

地址：西安市高新四路 1 号高科广场 A 座 2205 室

西南区域

洽谈电话：028-61388807

地址：成都市武侯区人民南路四段 11 号大陆国际 2006

洽谈电话：023-62956165

地址：重庆市渝中区两路口新干线大厦 A 座 2305 室

Ogawa is grateful
to have received
these awards:



PUTRA
BRAND AWARDS 2010
SILVER
In association with
MALAYSIA'S MOST VALUABLE BRANDS

制造商：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
地 址：厦门市前埔路 168 号



奥佳华官方微信二维码



奥佳华官方微博二维码