

NEW



大师椅 Master
SMART MASSAGE CHAIR



OGAWA

奧佳華

融入生活 享受健康

www.ogawaworld.net.cn

目录

| | |
|--------|----|
| 安全指引 | 2 |
| 保修权限 | 5 |
| 产品结构 | 6 |
| 产品移动说明 | 8 |
| 控制器 | 10 |
| 操作指南 | 11 |
| 功能特点 | 21 |
| 产品规格 | 22 |
| 异常情况 | 23 |
| 产品保养 | 24 |
| 联络我们 | 54 |



01 安全指引

警告!

在使用前请阅读所有的使用说明。

此按摩椅必须使用和插头相配的插座，不正确的连接插头可能会导致触电危险的发生。

如果对本产品是否安全接地有疑虑的话，请务必联系专业技术人员进行检查。如插座不适合本产品插头，请联系专业技术人员进行安装适当的插座。

在使用本产品时，为避免触电、灼伤、火灾或人员伤害的危险，必须遵守基本安全防护措施，包括以下内容：

1. 务必使用和插头相配的插座。
2. 一定要确保插头完全插入插座内，以避免短路或火灾危险。
3. 在使用结束后或清洁前，请务必拔掉电源线插头。
4. 请勿在高湿度的环境下使用本产品。
5. 请勿在室外或阳光直射的地方存放或使用本产品。
6. 如果在使用的过程中突然停电，请立即将开头拨至“O”的位置，且拔掉电源线插头，以免来电时损坏本产品。
7. 当电源线潮湿或损坏时请勿使用本产品。
8. 请勿用湿手插入和拔掉电源线插头，以免发生意外。
9. 当小孩、伤残人士、行动不便者在按摩椅附近或使用按摩椅时，一定

要有人在场看护。

10. 只能将本产品用于本说明书中阐述的用途。
11. 不要使用非 OGAWA 推荐的附件。
12. 在使用过程中请勿坐在按摩椅小腿上，以免导致意外。
13. 请勿试图站在扶手或靠背上，以免按摩椅发生倾倒从而导致意外。
14. 按摩过程中请勿进入睡眠状态。
15. 请经常保持按摩椅清洁，避免将其他物体插入按摩椅的缝隙中。
16. 请勿直接通过拉扯电源线来移动按摩椅。
17. 请确保当降低小腿或靠背时，其下方无其他障碍物，尤其是儿童。
18. 请在每次使用前，检查按摩椅靠背绒布等处是否有异常裂缝。如有异常，请勿使用并即时联系 OGAWA 售后服务中心。
19. 本产品仅为居家使用而设计。
20. 当您无法确定自己是否能使用按摩椅时，请先咨询医师。
21. 为避免因使用此按摩椅而导致不适或伤害，以下人士在使用本产品前应咨询医师：
 - 患有严重恶性肿瘤者
 - 患有严重心脏病者
 - 孕妇、产妇或月经期者
 - 刚做完手术，且伤口还没愈合者
 - 体内植入医用电子器械者
 - 因意外而造成脊髓疾病、脊椎骨折、肌肉拉伤或断裂者
 - 局部皮肤破损、溃疡、出血者不适宜按摩。
22. 如在使用过程中觉得疼痛，请立即停止使用；如果在使用过程中受到损伤，请立即就医。





23. 请勿按摩红肿或发炎的身体部位。
24. 本产品仅为家庭提供舒适的按摩享受，并非专业的按摩医疗机械，因此不能代替专业的治疗。
25. 建议每天使用按摩椅的时间为 30 分钟，按摩同一部位时间不宜超过 15 分钟，否则过度按摩会导致适得其反的效果，而且长时间使用会导致按摩椅过热并缩短产品使用寿命。
26. 请勿在喷气体溶胶或输氧的环境中使用本产品。
27. 12 岁或以下儿童不适宜用本产品。
28. 如果电源线损坏，必须使用专用的电源线或从其制造商或维修部买专用组件来更换。
29. 本产品配有加热功能，对热不敏感者慎用。

02 保修权限

1. 本保修权限不可转让。
2. 本保修服务仅对在 OGAWA 购买的产品有效。
3. 当要求保修服务时请出示正本购买凭据。
4. 在保修范围内的维修服务自购买之日起一年内有效。
5. 由于错误使用、不合理保养以及未经授权私自改装和维修此产品而导致的损坏，不属于保修范围。
6. 此保修范围不包括不属于产品本身的附件。
7. 此保修范围不适用于租赁、交易、商业、机构或其他非个人使用者。
8. 此保修范围所涉及的维修服务必须经过 OGAWA 授权，且必须由授权的技术人员维修。
9. 若需更换的维修附件缺货，OGAWA 有权采用替代配件进行维修。




03 产品结构

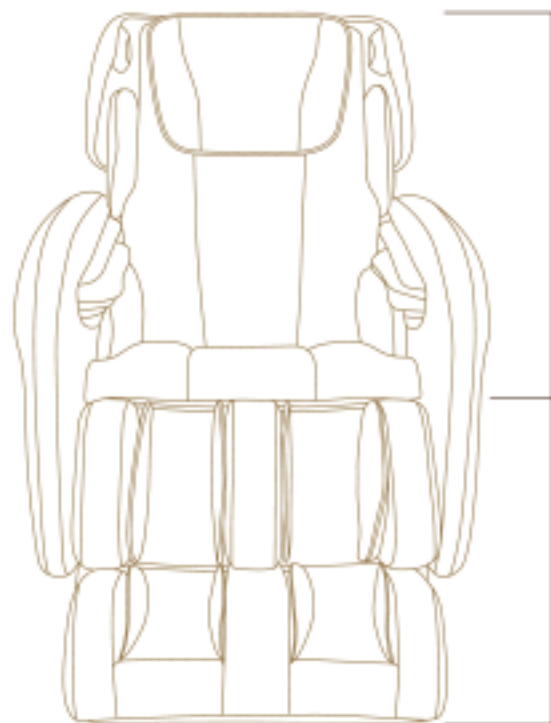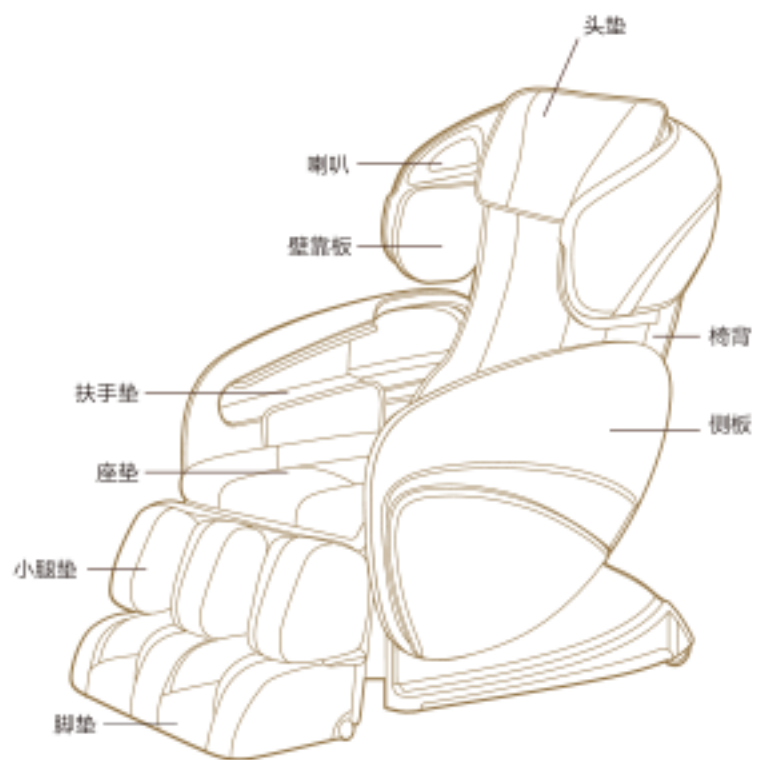


04 产品移动说明

托起小腿垫。将椅背倾斜 45° 以方便在室内自由移动按摩椅。

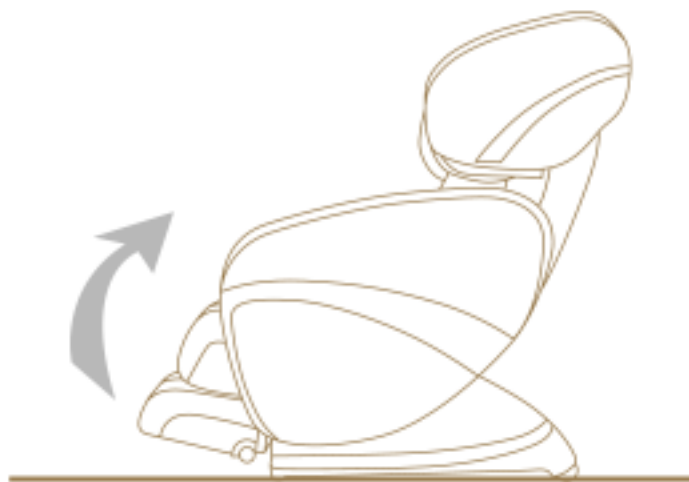

注意:

- 在移动按摩椅时一定要把腿垫完全收回。若不遵守，在移动过程中腿垫回到原始位置，有可能导致受伤的情况。
- 当有人坐在按摩椅上时，请不要移动椅子。
- 移动按摩椅时可能损坏地板，建议在本产品下铺上垫子等。

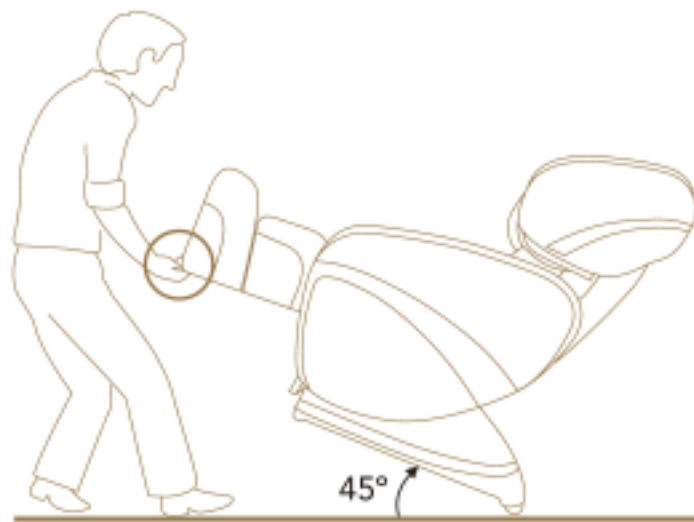

“Lv1 > Lv2 > Lv3 > Lv4 > Lv5” 进行循环切换。

31) 速度

捶击, 拍打, 瑞典式及指压按摩功能的速度调节控制键

在捶击, 拍打, 瑞典式及指压按摩功能运行中模式下, 每按一次此控制键将对按摩速度如 “Lv1 > Lv2 > Lv3 > Lv4 > Lv5” 进行循环切换。

32) 力度

揉捏功能力度调节控制键

在揉捏按摩功能运行中模式下, 每按一次此控制键将对按摩力度如 “Lv1 > Lv2 > Lv3 > Lv4 > Lv5” 进行循环切换。

气压按摩功能

33) 肩部气压

肩部气囊功能启停控制键 - 5 档充气强度可调节

按一次此功能控制键以启动肩部气囊按摩功能, 再按一次此键以停止气囊按摩功能。

34) 背 / 座气压

背部 / 座部气囊功能启停控制键 - 5 档充气强度可调节

按一次此功能控制键以启动背部 / 座部气囊按摩功能, 再按一次此键以停止气囊按摩功能。

35) 手部气压

手部气囊功能启停控制键 - 5 档充气强度可调节

按一次此功能控制键以启动手部气囊按摩功能, 再按一次此键以停止气囊按摩功能。

36) 脚部气压

小腿 / 足部气囊功能启停控制键 - 5 档充气强度可调节

按一次此功能控制键以启动腿部气囊按摩功能, 再按一次此键以停止气囊按摩功能。

37) 全身气囊按摩功能

全身气囊功能启停键 - 5 档充气强度可调节

按一次此功能控制键以启动全身气囊按摩功能, 再按一次此键以停止气囊按摩功能。

当任何一项全身自动按摩功能启动后 (全身气囊按摩功能除外), 按摩椅将自动对背部自动进行检测以达到最佳的按摩位置。
当按摩时间少于一分钟时, 蜂鸣器将发出声响以提示。

操作完成

使用完毕之后, 请按下 “开 / 关” 键, 按摩滚轮将自动复位, 复位完成后, 请按下按摩椅下方的电源开关至 “O” 的位置, 接着可以安全的拔出电源插头。



4) 零重力

按一次此键启动零重力 1 状态，再按一次此键将进行改变至零重力 2 状态，再按此键则关闭零重力功能。

备注：当零重力 1 角度正在上升过程中，此时按下零重力控制键零重力就停止于当时的角度，如果不按下零重力控制键，角度就会上升到默认中的零重力 1 位置。零重力 2 状态控制也是一样。

注：1、“泰式拉伸”、“运动恢复”和“快速按摩”按摩功能启动时零重力控制键将会无效。

2、“老年保健”按摩功能启动时，零重力功能只能调节到零重力 1 的状态。

5) 升腿 / 降腿

腿部角度调节控制键

此二功能控制键可调节小腿的升 / 降角度。按一次升腿或降腿功能控制键以进行小腿角度调节。当小腿到达适当的角度时，再按一次升腿、降腿中的其中一个控制键即可定位。

6) 躺卧 / 起坐

按摩角度调节控制键

此二功能控制键可调节躺卧 / 起坐角度。按一次躺卧或起坐功能控制键以进行按摩角度调节。当按摩椅到达适当的角度时，再按一次躺卧、起坐中的其中一个控制键即可定位。

以下是提供可随意选择的各种全身或者局部自动按摩程序：

7) 男士释压

8) 女士保养

9) 老年保健 *1

10) 快速按摩 *2*4

11) 泰式拉伸 *2

12) 运动恢复 *2*3

13) 深度按摩 *5

14) 中式推拿

15) 颈肩重点

16) 背部重点

17) 腰部重点

*1 此项自动按摩程序运行时，零重力功能只有 1 档可调。

*2 此项自动按摩程序运行时，零重力功能控制键将会无效。

*3 此项自动按摩程序定时为 20 分钟。20 分钟过后，按摩椅将于零重力 1 形态自动关机。

*4 此项自动按摩程序定时为 10 分钟。10 分钟过后，按摩椅将于自动复位关机。

*5 此项自动按摩程序按摩姿势为倒立按摩角度，有不适应该角度的使用者请慎用！



18) 摇杆

上 / 下调节

定点和局部功能调节控制

当定点和局部按摩功能启动时，此功能控制摇杆可用来调节按摩滚轮的上下位置。持续把摇杆推往上 / 下方向，按摩滚轮将依据摇杆的方向上 / 下行走。当按摩滚轮达到最佳的按摩位置时，释放摇杆便可。

当自动背部扫描无法满足个人要求时，可以再按摩椅发出提示音的 10 秒内，持续把摇杆推往上 / 下方向。当按摩滚轮达到最佳的按摩位置时，释放摇杆便可。

3D 功能调节控制

把摇杆推往左 / 右方向，3D 按摩滚轮将向前凸出或回缩移动。此 3D 系统一共有 6 档供选择，以提供不一样的按摩享受。

19) 叩击法

叩击手法自动程序控制键

按一次此功能控制键启动叩击法程序功能。再按一次此键，关闭此功能。

注：在自动程序运行模式下，按此键，切换为此功能。

20) 深度甩腰

深度甩腰功能启停控制键

按一次此功能控制键以启动革新的全身气压扭摆按摩功能，再按一次此键以停止深度甩腰按摩功能。

21) 脚底滚轮

脚底滚轮功能启停控制键

按一次此功能控制键以启动脚底滚轮功能，再按一次此键以停止脚底滚轮功能。

注：在自动程序运行模式下，可按此功能键进行脚底滚轮功能的开 / 关。

22) 刮痧

刮痧功能启停控制键

按一次此功能控制键以启动刮痧功能，再按一次此键以停止刮痧功能。

23) 温热

腰部温热功能启停控制键

按一次此功能控制键以启动腰部温热功能，再按一次此键以停止腰部温热功能。

注：在自动程序运行模式下，可按此功能键进行温热功能的开 / 关。


手动按摩功能

24) 揉捏

揉捏功能启停控制键 - 5 档力度可调节

按一次此功能控制键以中档按摩力度启动全身揉捏模式 1 按摩功能，再按一次以启动揉捏模式 2 按摩功能，再按此键以切换到瑞典式模式 1 按摩功能。

24) 瑞典式

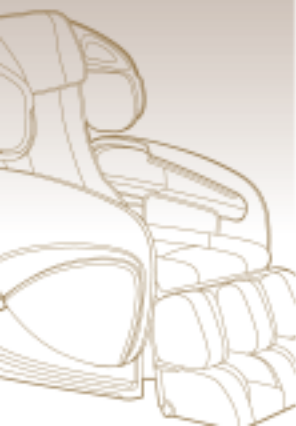

瑞典式功能启停控制键 - 5 档速度可调节

当揉捏模式 2 按摩功能运行中，按下此键以中档按摩速度启动瑞典式模式 1 按摩功能。再按一次以启动瑞典式模式 2 按摩功能。再按此键以停止瑞典式按摩功能。

若要直接启动瑞典式按摩功能，在待机模式下直接按此功能控制键三次。

25) 捶击

捶击功能启停控制键 - 3 档宽度，5 档速度可调节

按一次此功能控制键以中档按摩速度启动全身捶击模式 1 按摩功能。再按一次以启动捶击模式 2 按摩功能。再按此键以切换到指压模式 1 按摩功能。

25) 指压

指压功能启停控制键 - 3 档宽度，5 档速度可调节

当捶击模式 2 按摩功能运行中，按下此键以中档按摩速度启动指压模式 1 按摩功能。再按一次以启动指压模式 2 按摩功能。再按此键以停止指压按摩功能。

若要直接启动指压按摩功能，在待机模式下直接按此功能控制键三次。

26) 拍打

拍打功能启停控制键 - 3 档宽度，5 档速度可调节

按一次此功能控制键以中档按摩速度启动全身拍打模式 1 按摩功能。再按一次以启动拍打模式 2 按摩功能。再按此键以切换到推拿按摩功能。

26) 推拿

推拿功能启停控制键 - 3 档宽度可调节

当拍打模式 2 按摩功能运行中，按下此键以中档按摩宽度启动推拿按摩功能。再按此键以停止指压按摩功能。若要直接启动推拿按摩功能，在待机模式下直接按下此功能控制键三次。

注：在“定点”按摩状态下使用无效。

27) 定点

背部定点按摩功能

在所需按摩的位置下按此功能控制键将对背部位置启动定点按摩功能。再按一次此功能控制键以解除定点按摩功能。

28) 宽度

捶击、拍打、指压及推拿按摩功能的宽度调节控制键

在捶击，拍打，指压及推拿按摩功运行模式下，每按一次此控制键将对按摩滚轮宽度如“窄 > 中 > 宽”进行循环切换。

29) 区间

局部区间按摩功能

在所需按摩的位置下按此功能控制键将对背部位置启动背部局部区间按摩功能。再按一次此功能控制键以解除背部局部区间按摩功能。

30) 气压强度

气囊按摩强度调节控制键 - 5 档强度可调节

在气囊按摩功能运行中模式下，每按一次此控制键将对按摩充气强度如



05 控制器



06 操作指南

接通电源，将按摩椅座架下方的电源开关按至“1”的位置，按摩椅处于复位状态。此时按摩椅进入待机状态，在待机状态下，开/关控制键的红灯会不停的闪烁，表示已接通电源。待机状态下，只有开关、零重力、升背、倒背、升腿和降腿六个功能控制键可以操作。

1) 开/关

整机按摩功能启动/停止控制键

按一下此控制键启动按摩椅和手拉器荧幕，此时按下任何控制键开始按摩功能。定时功能也将同时被启动。按一下此键以停止按摩功能并关机，按摩轮、靠背和小腿恢复到原位。

2) 定时

按摩时间控制键

当按摩功能启动时，定时功能时间预设为 15 分钟，每按一次此控制键，定时时间段将按“20>25>30>5>10>15>20”分钟循环。

注：“运动恢复”设定为 20 分钟。

3) 暂停

按下此功能键将暂停按摩与定时功能。在暂停模式中，暂停控制键的橙色灯将会闪烁。再按此控制键以恢复被暂停的按摩功能，定时功能也将恢复操作。

07 功能特点

OGAWA 按摩椅透过电脑智能化控制, 配合揉捏, 瑞典式, 捶击, 指压, 拍打, 推拿, 刮痧, 脚底滚轮, 震动和气压按摩功能. 多种按摩手法针对各个穴位进行按摩, 有效舒缓疲劳释压放松.

具备 8 套自动按摩程序及各种手动按摩功能以符合广大顾客的要求.

除了精确的穴位按摩外, 精心设计的 3D 科技符合人体背部人工学, 以提供更有效的按摩享受.

1. 按摩齿轮采用连锁齿轮为背部穴位提供更深入的按摩.
2. 按摩椅具备双自动调整, 椅背可以从 115 度调整至 160 度, 小腿则可以从 0 度到 90 度间进行调整.
3. 定时功能将按照你的需求对按摩时间进行调整.
4. 液晶显示使手控器更易于操作.
5. 具备过热及过流保护, 更加安全.
6. 操作是由微型智能处理器控制, 使性能始终如一, 卓越有效.
7. 根据人体工学设计, 以提供更有效的按摩效果.



08 产品规格

| | |
|----------------|-----------------------|
| 产品名称 | 大师椅 Smart Master |
| 型号 | OG-7558G |
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | 50 赫兹 |
| 额定功率 | 300 瓦 |
| 喇叭功率 | 14 瓦 (双边) |
| 定时 | 5/10/15/20/25/30 分钟 |
| 额定工作时间 | 30 分钟 |
| 尺寸 (长 * 宽 * 高) | 直立状态: 136x 87x 129 公分 |
| | 倒背状态: 182x 87x 96 公分 |
| 重量 | 整机毛重: 140 公斤 |
| | 整机净重: 122 公斤 |
| 线长 | 手控器线长: 1.5 米 |
| | 电源线长: 1.8 米 |
| | 音频线长: 约 15+75 厘米 |
| 使用环境 | 环境温度: 10℃ -40℃ |
| | 相对湿度: 30-85RH |
| 储存环境 | 环境温度: 20℃ -60℃ |
| | 湿度水平: 30-85RH |
| 安全功能 | 具备过热, 过流保护 |
| 使用益处 | 促进血液循环, 放松机体 |



09 异常情况

此按摩椅为微电脑控制，对电压波较为敏感。如果电压波动超过额定电压 +10% 或 -15%，按摩椅可能出现以下情况。

| 可能出现的异常情况 | 处理方法 |
|------------------------|--|
| 插上电源，但按摩椅无法操作 | 1) 检查电源插头是否插好或是否通电 2) 检查按摩椅后下方的电源开关是否处于“1”的位置 |
| 使用过程中，控制器可以操作，但按摩椅无法操作 | 长时间操作后，按摩椅引擎的温度过高，按摩椅将自动处于温度保护状态。请关闭电源并暂停使用 30-50 分钟以上让引擎内部散热。 |
| 使用过程中，控制器无法操作，按摩椅也无法操作 | 1) 在自动定时功能启动后，若定时时间已到，请重新按键即可操作。 2) 关掉电源，重新通电启动按摩椅 |

若以上处理方法无效，请联系 OGAWA 服务中心

10 产品保养

- 避免用水或其他化学剂来清洗按摩椅。
- 避免重压、硬物敲击、强拉、刮花按摩椅表面。
- 操作时请轻触按键，勿用硬物按压。
- 使用完毕后请立即拔出电源插头。
- 建议使用时间不超过 30 分钟，过长过度使用将可能导致适得其反的效果。



Contents

| | |
|----------------------|----|
| Safety Instructions | 26 |
| Warranty Claims | 30 |
| Parts of the Chair | 31 |
| Moving the Chair | 33 |
| Controller Diagram | 35 |
| Operation Guides | 36 |
| Features | 49 |
| Chair Specifications | 51 |
| Troubleshooting | 52 |
| Product Maintenances | 53 |

01 Safety instructions

Warning!

The plug must be fully inserted into an appropriate outlet. Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in an electric shock.

Check with a qualified electrician and servicemen if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided by the product. If the outlet is unsuitable, please ensure that a proper outlet is installed by qualified electrician.

When using the massage chair, basic precautions should always be followed to reduce the risk of electric shock, an injury or burns to the person.

Read the following details before usage:

1. Be sure to insert massage chair plug into the proper electrical outlet.
2. Make sure the power plug is securely inserted into the proper electrical outlet to reduce the risk of short-circuit and fire.
3. Always unplug the massage chair from the electrical outlet immediately after use and before cleaning.



4. DO NOT use the massage chair in places where the humidity is high.
5. DO NOT use the massage chair outdoors and avoid places with direct sunlight.
6. If the power goes off during use, be sure to turn the power switch to the OFF position and pull the power plug out from the socket to prevent any damages at the time when the power comes back.
7. Never operate the massage chair if the power cord is wet or damaged.
8. Never plug/unplug the power cord from the socket with wet hands.
9. Close and continuous supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids or disabled persons.
10. Use this appliance only for its intended use as described in this user manual.
11. Do not use any attachments other than those recommended by OGAWA.
12. Do not stand, sit or jump in the calves rest when massage chair is usage. This may result in an accident an injury.
13. Do not attempt to stand on the backrest and armrest .This may result in an accident and injury.
14. Be careful not to fall asleep during the massage.

15. Always keep the massage chair clean and never insert any object into the gaps on and around the massage chair.
16. Do not remove the massage chair by pulling the power supply cord.
17. Be sure to check that there is no one (children in particular), pet or obstacles under the massage chair prior to lowering the leg rest /backrest.
18. Always check whether the surface of the massage chair is torn or ripped before usage. If you find any unfamiliar rips in any area of the cloth in the backrest, do not use the massage chair. Kindly contact OGAWA service center immediately for repairs.
19. This appliance is designed for household use only.
20. For those suffering from illnesses, please consult your doctor on whether you can use the massage chair if in doubt.
21. The following persons are requested to consult a doctor prior to use in order to reduce the risk of user feeling sick or suffering from injury:
 - Those who have malignant tumor
 - Those who suffer from heart disease
 - Those who are pregnant experiencing menstruation and puerperal fever
 - Those who require complete rest
 - Those who are under medical treatment



- Those who suffer from back problems or whose backbone is abnormal or bent
- 22.If you experience pain during usage, stop usage immediately.
If any injuries occurs, consult a doctor immediately
 - 23.Never massage on swollen or inflamed parts of the body.
 - 24.This product is non-professional appliance designed to provide a comfortable massage. Do not use this product as a substitute for medical treatment.
 - 25.Do not use this massage chair for more than 30minutes at one time and kindly limit the massage to a concentrated area for not more than 15minutes. Over-massaging can product overheating thus giving it a shorter lifespan.
 - 26.Do not operate where aerosol (spray) products are used or where oxygen is being administered.
 - 27.The massage chair is not suitable for children aged 12years old and below.
 - 28.If the supply is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
 - 29.This product is equipped with heating function, DO NOT use over insensitive skin area or in the presence of poor circulation.


02 Warranty Claims

1. Warranty is not transferable.
2. This warranty is effective only if the product is purchased from OGAWA.
3. Proof of purchase (original receipt) is required for all warranty repairs.
4. All implied warranties, including but not limited to these implied warranties of fitness and merchantability, are limited in the total duration of 1 year from the original purchase date.
5. Damage due to misuse, improper treatment and unauthorized modifications and repairs are not covered by this warranty.
6. Warranty does not cover accessories and attachments which do not belong to the massage chair.
7. Warranty is not effective to rental, Business, commercial, institutional, or other non-residential users.
8. All services covered by this warranty must be approved by OGAWA and repaired by authorized technicians only.
9. If replacement parts for defective materials are not available, OGAWA reserves the right to make substitution in lieu of repair or replacement.



05 Moving The Chair

1. Restore the footrest to its original position.
2. Recline the chair to tilt approximately 45degrees. Move the chair using the wheels as the fulcrum.

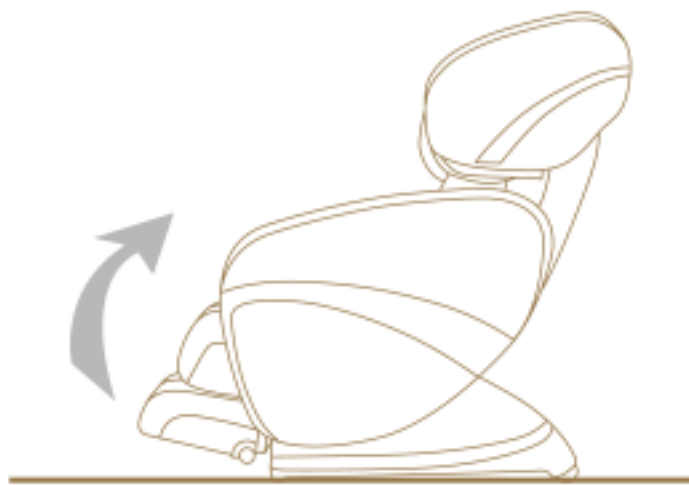


Note:



Always return the footrest to its original length and restore it to its original position before moving the chair, otherwise injury during movement may result.

Do not move the chair while a person is seated on it.

Place a mat on the floor and gently roll the chair over it to avoid damaging the floor.

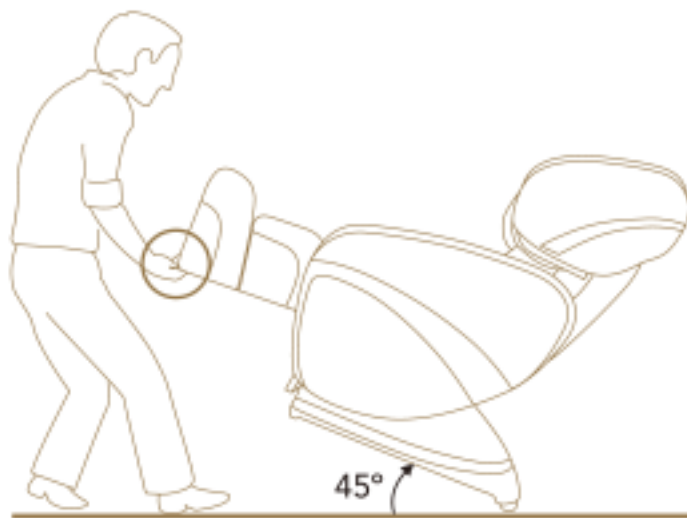

03 Parts of the Chair

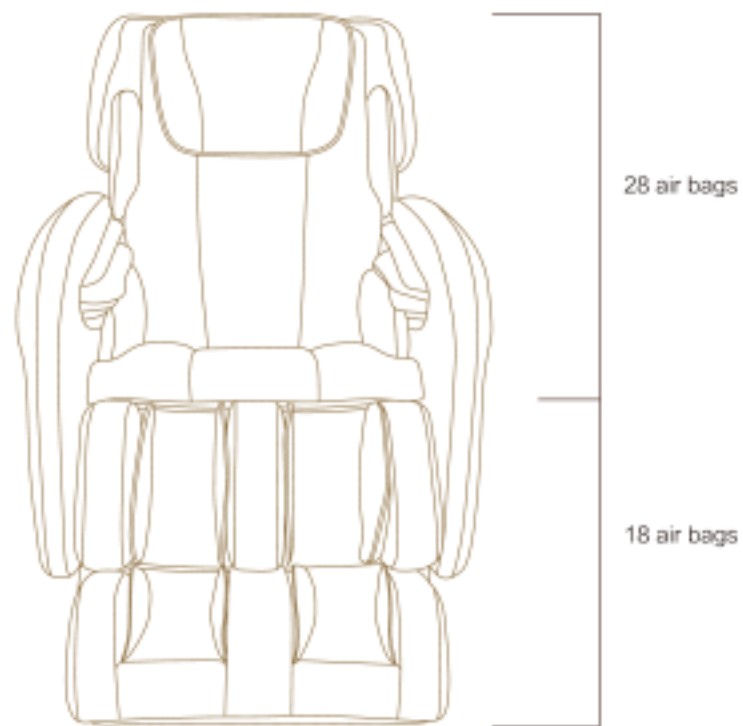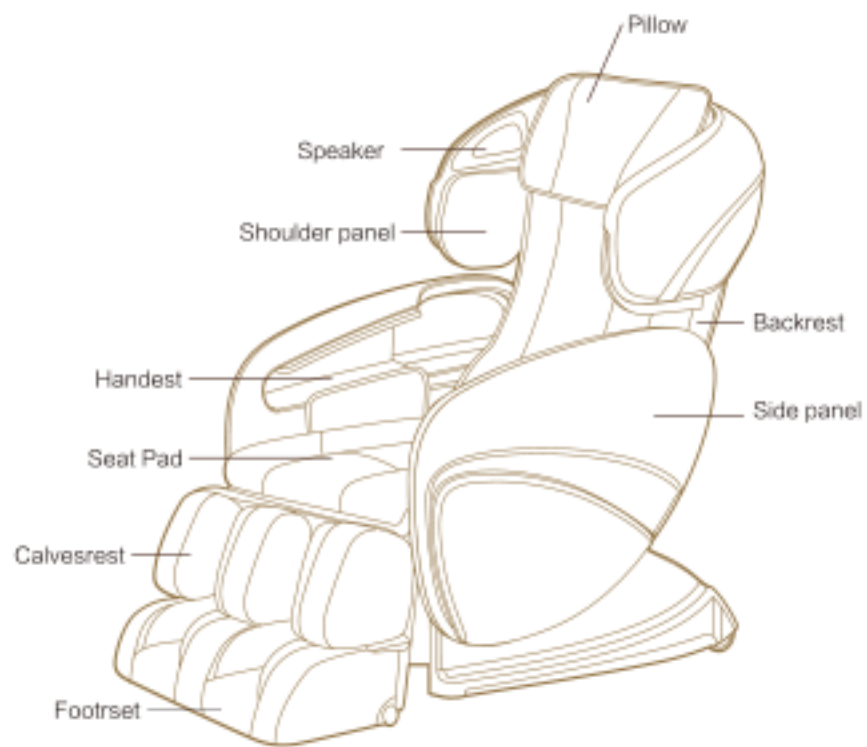

06 Controller Diagram



07 Operation Guides

Connect to the power supply, and turn the switch to "I" position, chair is now in idle mode. During its idle mode, ON/OFF button will blink, which means the electric is connected. During its idle mode, only ON/OFF, Pause, Incline, Recline, Incline Leg and Recline Leg button can be operated.

Control Buttons for the Massage Chair

1) ON/OFF

The Start/Stop Control Button

Press this button to light ON the LCD screen. Press any massage function button to start massage. This will initiate the timer function. Press this button again to stop all massage functions, massage chair will return to its original position.

2)TIMER

Time interval Control Button

When a massage function is activated, the timer is preset at 15 minutes. Every single press on this button will change the timer interval in the sequence of "20>25>30>5>10>15>20" minutes.

Note: RECOVERY auto massage program is fixed 20 minutes.



3)PAUSE

Press this button once to halt running massage function and countdown timer. During pause mode, the pause button will be blinking. Press this button again to cease the "Pause" function and resume previous massage function as well as countdown timer.

4)ZERO-G

Press this button to active the Zero-G1 function in default, press the button again to activate Zero-G2 function, press again to return to idle position.

Note: If this button is pressed while moving to Zero-G1, massage chair will stop at latest angle. If Zero-G button is not press while moving to Zero-G1, massage will stop at preset Zero-G1 angle. Same conditions apply to Zero-G2 function.

Note:1. ZERO-G button is NOT controllable in below massage programs:

THAI

RECOVERY

QUICK MASSAGE

2.zero gravity function can only adjust to the state of zero gravity

1:ELDER

5)INCLINE LEG / RECLINE LEG

Angle Adjustment Control Button for Footrest

These two control buttons can adjust massage angle of the Footrest. Press on the Incline Leg or Recline Leg control button to adjust Footrest to a desire comfortable position. Press either button again to stop it.

6)INCLINE/RECLINE

Angle Adjustment Control Button for Massage Chair

These two control buttons can adjust the Incline/Recline angle of the massage chair. Press on the Incline or Recline control button to adjust the Backrest and Footrest to a desire comfortable position. Press either button again to stop it.

The following are the Auto Programs available:

7)GENTLEMAN

8)LADY

9)ELDER *1

10)QUICK MASSAGE*2*4

11)THAI*2

12)RECOVERY*2*3

13) DEEP TISSUE*5

14)CHINESE

15)DEEP SHOULDER

16)DEEP WAIST



17)FULL BACK

*1 Only Zero-G1 is available for adjustment in particular massage program

*2 ZeroG button is NOT controllable in particular massage program

*3 Massage time is fixed at 20 minute. After 20 minute, massage chair will automatically shut down at ZeroG position

*4 The automatic massage program timing for 10 minutes. 10 minutes later, the massage chair will be automatically reset to turn it off

*5 The automatic massage program pose for a handstand Angle, you are unwell should Angle users please careful!

18)JOYSTICK

Upward/Downward adjustment

The position adjustment button for spot and partial massage

When the spot or partial massage functions are activated, joystick can be used to move the massage rollers. Hold the joystick Up/Down to move the massage rollers upward/downward respectively. Release the joystick when the desired position is reached.

When auto Backrest Scan can't detect desire massage stroke,

push Joystick Upward/Downward to perform fine adjustment within 10 second after buzzer sounded. Release joystick when desire position is reached.

The 3D adjustment

Push the joystick Left/Right to adjust the 3D massage roller forward/backward respectively.

There are 6 different levels available for adjustments to suite various massage strength requirement.

19)TAPPING

Tapping function Start/Stop Control Button

Press this button to activate Tapping function, press this button again to stop the Tapping function.


Note:During Auto Program mode, pressing this button can disable/enable the Tapping function.

20)ZIG – ZAG

ZIG – ZAG function Start/Stop Control Button

Press this button to activate evolutionary full body twisting massage function with airbags. Press this button again to stop ZIG – ZAG function.

21)FOOT ROLLING

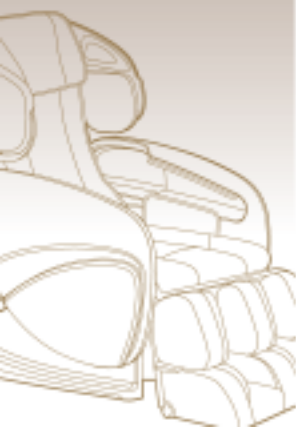

levels of intensity to be adjusted

Press this button once to activate rhythmic full body air pressure massage. Press this button again to stop the function.

Note: During Auto Program mode, pressing this button can disable/enable the air function.

When either one of the Auto Massage or Scrapping Program (except Full Air) is selected, massage chair will automatically perform a Backrest Scanning to detect shoulder position on user for most comfortable massage experience.

Buzzer will sound to remind users when countdown timer less than 1 minute.

Finish Operating

Please press the "ON/OFF" button after use. Massage Rollers will restore to its original position; then switch the power supply button under the chair to "O" and unplug the machine from the wire socket.



08 Features

OGAWA massage Chair is controlled by a microcomputer that performs various intelligent massage type and combinations such as Kneading, Swedish, Tapping, Shiatsu, Clapping, Rolling, Scrapping, Foot Roller, Vibration and Air Massage. All these types performing massage with accurate on the acupressure points, to effectively alleviate fatigue, promote metabolism and improve blood circulation. Equipped with 8 set of full body automatic massage programs thoroughly fulfill your various need.

Provides 8 set of Auto massage programs and various type of manual massage function provides to various requirement in publics.

In addition to precise points massage, 3D technology massage that is specially designed for the back according to the curve of the human body to provide a more effective and thorough massage.

- 1.The massage rollers use an interlocking gear to provide an in-depth massage to the acupressure points on the back.
- 2.Designed with double automatic adjustment, the Chair's Backrest can be adjusted from 115 degree to 160 degree, while the Footrest is from 0 degree to 90 degree.
- 3.The Timer Function can be adjusted according to your desired



Foot roll function Start/Stop Control Button

Press this button once to activate rhythmic foot base rolling function, press this button again to stop the foot base rolling function.

Note: During Auto Program mode, pressing this button can disable/enable the Foot Rolling function.

22)CRAPPING

Scraping function Start/Stop Control Button

Press this button to activate Scraping function, press this button again to stop the Scraping function.

23)HEAT

Heat function Start/Stop Control Button

Press this button to activate knees heat function, press this button again to stop the Heat function.

Note: 1.Calvesrest air bags must be turned

During Auto Program mode, pressing this button can disable/enable the Heat function.

Manual Massage Program

24)KNEADING

Kneading function Start/Stop Control Button - 5 levels

of strength to be adjusted

Press this button to activate rhythmic mode 1 Kneading function for a full back massage at medium strength. Press the button again to activate mode 2 Kneading function. Press the button for the third time to stop Kneading function and switch to mode 1 Swedish function.

24)SWEDISH

Swedish function Start/Stop Control Button - 5 levels of speed to be adjusted.

When mode 2 Kneading function is engage, press this button to activate rhythmic mode 1 Swedish function for a full back massage at medium speed. Press this button again to activate mode 2 Swedish function. Press once more to stop the Swedish function. To activate Swedish function directly, press this button 3 times during idle mode.

25)TAPPING

Tapping function Start/Stop Control Button - 3 levels of width, 5 levels of speed to be adjusted.

Press this button to activate rhythmic mode 1 Tapping function for a full back massage at medium speed. Press the button again to activate mode 2 Tapping function.

Press the button for the third time to stop Tapping function and



duration of the massage programmer.

4. Liquid Crystal Display for a user friendly operation even in the dark.
5. Designed with power surge protector as well as automatic thermal sensor and auto shutdown for safety.
6. The operation is controlled by intelligent microprocessor for excellent performance and consistent quality.
7. Ergonomically designed to enhance massage experience.

09 Chair Specifications

| | |
|------------------------------------|--|
| Product Name | Ogawa Smart DeLight |
| Model no. | OG7558G |
| Power source | 220V~ |
| Alternating current | 50Hz |
| Power consumption | 300W |
| Power of speakers | 14W (2 sides) |
| Timer | 5/10/15/20/25/30 minutes |
| Maximum operating period | 30 minutes |
| Dimension (Length/width/height) | Upright position: 136x 87x 129 cm |
| | Reclined position: 182x 87x 96 cm |
| Weight | Product gross weight: 140 kg |
| | Product net weight: 122 kg |
| Length of the wire | Controller wire: Approx 1.5M |
| | Power supply wire: Approx 1.8M |
| | Music connection wire: Approx 15+75CM |
| Usage condition | Environment temperature: 10°C ~40°C |
| | Contrasting humidity: 30~85RH |
| Storage condition | Storage temperature: 20°C ~60°C |
| | Storage humidity level : 30~85RH |
| Safety feature | Equipped with overheated and power surge safety protection |
| Using benefits | Increasing blood circulation Relieving muscular fatigue |

switch to mode 1 Shiatsu function.

25)SHIATSU

Shiatsu function Start/Stop Control Button - 3 levels of width, 5 levels of speed to be adjusted.

When mode 2 Tapping function is engage, press this button to activate rhythmic mode 1 Shiatsu function for a full back massage at medium speed. Press this button again to activate mode 2 Shiatsu function. Press once more to stop the Shiatsu function. To activate Shiatsu function directly, press this button 3 times during idle mode.

26)CLAPPING

Clapping function Start/Stop Control Button - 3 levels of width, 5 levels of speed to be adjusted

Press this button to activate rhythmic mode 1 Clapping function for a full back massage at medium speed. Press the button again to activate mode 2 Clapping function.

Press the button for the third time to stop Clapping function and switch to Rolling function.

26) ROLLING

Rolling function Start/Stop Control Button - 3 levels of width to be adjusted

When mode 2 Clapping function is engage, press this button to activate Rolling function for a full back massage. Press this button again to stop the Rolling function. To activate Rolling directly, press this button 3 times during idle mode.

Note: This function cannot perform "Spot" massage function.

27)SPOT

The Spot Back massage

Press this button to activate Spot function, press this button again to stop the Spot function.

28)WIDTH

The Width Adjustment Button for Tapping, Clapping, Shiatsu and Rolling function

When Tapping, Clapping, Shiatsu or Rolling function is engage, every single press on this button will change the massage width interval in the sequence of "Narrow > Medium > Wide" in cycle.

29)PARTIAL

The Partial Back massage

Press this button to activate Partial function, press this button again to stop the Partial function.

Note: Partial Massage will take the latest position as the center to perform Partial Massage with the distance approx. 8 cm



10 Troubleshooting

This massage chair is controlled by microcomputer and is susceptible to power surge even by +10% or -15%. The massage chair will show the following strange circumstances:

| Situations | Solution |
|---|--|
| The Massage Chair cannot operate even though it has been connected to the power supply. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Check whether the plug is well connected and working well 2) Check whether the switch on the Massage Chair is turned to position "I" |
| During operation, the controller is working but not the Massage Chair | The Massage Chair could be overheated after prolonged use. It will automatically cool down to resume its normal condition. Please turn OFF the power and allow the chair to cool down for 30 to 50 minutes. |
| During operation, both the Controller and the Massage Chair are not working | <ol style="list-style-type: none"> 1) If the set-time in the Timer is complete, please press the timer function again to resume operation. 2) Switch OFF power, and switch ON again to activate the Chair. |

If above solutions are not workable, kindly refer to "product warranty card" and contact Ogawa Service Center.

11 Product Maintenance

Do not use chemical base cleaning detergent to clean the surface of the chair. Use only water.

Do not stack, pull harshly, stab or slit the surface of the massage chair.

Press the controller's buttons with gently during operation, avoids hitting with hard object.

Always pull out the power supply wire plug after using.

Recommend duration of the operation is 30 minutes. It is not advisable to exceed the suggested time frame.



30)AIR INTENSITY

The Intensity Adjustment Button for Air pressure massage, 5 levels of intensity to be adjusted

When Air massage function is engage, every single press on this button will change the massage speed interval in the sequence of "Lv1 > Lv2 > Lv3 > Lv4 > Lv5" in cycle.

31)SPEED

The Speed Adjustment Button for Tapping, Clapping, Swedish and Shiatsu function

When Tapping, Clapping, Swedish or Shiatsu function is engage, every single press on this button will change the massage speed interval in the sequence of "Lv1 > Lv2 > Lv3 > Lv4 > Lv5" in cycle.

32)STRENGTH

The Strength Adjustment Button for Kneading function

When Kneading function is engage, every single press on this button will change the massage speed strength interval in the sequence of "Lv1 > Lv2 > Lv3 > Lv4 > Lv5" in cycle.

Setting Air Squeeze

33)SHOULDER

Shoulder Air Squeeze Massage Control Button - 5 levels of intensity to be adjusted

Press this button once to activate rhythmic air massage at shoulder. Press this button again to stop the function.

34)BACK & SEAT

Back and Seat Air Squeeze Massage Control Button - 5 levels of intensity to be adjusted

Press this button once to activate rhythmic air massage at back and seat. Press this button again to stop the function.

35)HAND REST

Hand Rest Air Squeeze Massage Control Button - 5 levels of intensity to be adjusted

Press this button once to activate rhythmic air pressure massage at Hand Rest. Press this button again to stop the function.


36)FOOT REST

Footrest Air Squeeze Massage Control Button - 5 levels of intensity to be adjusted

Press this button once to activate rhythmic air pressure massage at Footrest. Press this button again to stop the function.

37)FULL AIR

Full Body Air Pressure Massage Control Button - 5

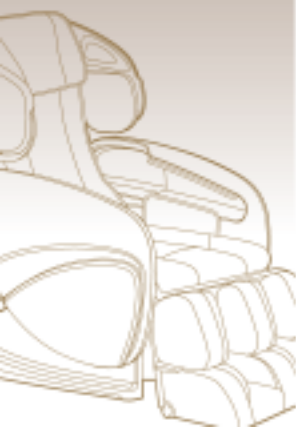

Ogawa is grateful
to have received
these awards:



PUTRA
BRAND AWARDS 2019
SILVER
REPUTATION & BRAND VALUE

销售商：厦门蒙发利营销有限公司

地址：厦门市思明区前埔路 168 号



奥佳华官方微信二维码



奥佳华官方微博二维码